
NEW FLY



EFFECTIVE
SCIENCE
TECHNOLOGY

REAL MED *personal care*



**MANUALE COMPLETO DEI PROGRAMMI PER USO
ESTETICO - BENESSERE - SPORTIVO E.M.S.**

**ULTRASUONI - ELETTROSTIMOLAZIONE
MAGNETO PLUS - MAGNETO LIGHT - LASER**

CE
IT

INDICE

INTRODUZIONE	3
GAMMA ACCESSORI	4
PROGRAMMI ULTRASONICI ESTETICI E BENESSERE	5
PROGRAMMI MAGNETO PLUS ESTETICI E BENESSERE	11
PROGRAMMI MAGNETO LIGHT ESTETICI E BENESSERE	17
MAF THERAPY	19
PROGRAMMI LASER	21
PROGRAMMI SPORTIVI E.M.S.	23
LISTA PROGRAMMI	Su retrocopertina

INTRODUZIONE

UNA CLINICA PORTATILE CON TUTTE LE FREQUENZE DELLA SALUTE

Nasce **REALMED PERSONAL CARE**, il primo dispositivo che unisce tutte le frequenze della medicina naturale, ovvero gli strumenti che danno vita armonicamente alla sinfonia del riequilibrio biologico. Tanti dispositivi in uno solo, attivabili in sinergia.

Fino ad ora nessuno aveva realizzato trattamenti sistemici sull'intero corpo insieme a interventi su parti locali per trarre il massimo beneficio da frequenze e trattamenti convergenti. L'orchestra **REALMED PERSONAL CARE** è composta dai seguenti strumenti:

- Due canali autonomi di Campi Elettro Magnetici Pulsanti a Bassa e Alta Frequenza, a ognuno si possono eventualmente collegare due materassini trapuntati da circa 800 Gauss;
- Ultrasuoni;
- Raggi Infrarossi;
- EMS - elettrostimolazioni di ultima generazione;
- Tutti gli accessori possibili e personalizzabili.

Ad esempio, mentre con un canale dei CEMP si tratta su tutto il corpo l'osteoporosi, l'artrosi, l'artrite, la fibromialgia tramite l'innovativo materassino notturno con potenza fino a 750 gauss (anche per i casi più difficili), contemporaneamente si può fare un trattamento locale, segnatamente per la psoriasi o l'algodistrofia, con la Bassa frequenza che arriva in profondità e l'Alta frequenza che agisce in superficie. I benefici biologici di un uso combinato delle due gamme di frequenze sono straordinari e di fatto non vengono utilizzati propriamente e contestualmente

dall'intero settore.

Inoltre è possibile attivare contemporaneamente un programma di Infrarossi per le aree infiammate e da riequilibrare nella rete linfatica e vascolare, oppure combinare i programmi antalgici dei CEMP con l'uso degli Ultrasuoni, che hanno importanti applicazioni anche in estetica.

Le innovative elettrostimolazioni consentono di attivare un programma integrato con i CEMP di risveglio e potenziamento muscolare, intervenendo direttamente sulle fibre muscolari (EMS) o sulle cellule che donano energia all'intero organismo (i CEMP attivano l'ATP). Una metodologia estremamente efficace e valida per tutti, dagli anziani allettati alle persone di mezza età che desiderano ritardare il processo di invecchiamento biologico, sino ai giovani che debbono recuperare l'usura dell'attività sportiva.

Belli dentro e belli fuori. Sani dentro e sani fuori. **REALMED PERSONAL CARE** è una clinica della bellezza attraverso il riequilibrio biologico. Nessun altro dispositivo dispone dell'efficacia dei CEMP che risanano il derma in profondità con il riequilibrio capillare e lo smaltimento delle tossine nella matrice extracellulare, insieme alla tonificazione, compattezza, lucentezza del derma in superficie, con rapidi evidenti processi di rigenerazione delle lacerazioni. Rughe, ogni forma di cellulite, occhiaie hanno le ore contate: il trattamento è riscontrabile ad ogni applicazione e migliora in progressione, non è sintomatico. Questo non significa che non invecchieremo: riconosceremo il processo biologico e lo affronteremo con gli strumenti antiaging più efficaci e duraturi. Ogni cellula darà il meglio del nostro programma biologico.

REALMED PERSONAL CARE, dispositivo unico a livello internazionale, nasce dalla collaborazione clinica, scientifica, tecnologica di **EST** con **NEW FLY**, con un unico obiettivo: rendere accessibile per primi l'innovazione della ricerca medica rigenerativa, riabilitativa, antiaging a tutte le persone, considerate pazienti e non clienti. Il dispositivo è stato concepito per un utilizzo facile ed ergonomico, pur nella complessità delle prestazioni. L'intero settore dei dispositivi medici ad uso familiare si limita a vendere, tuttavia senza una assistenza clinica e operativa garantita a ciascuno, con indicazioni e protocolli personalizzati, non si ottiene il massimo beneficio clinico. Solo il paziente può valutare l'andamento e i miglioramenti con i diversi trattamenti, e non deve essere abbandonato a sé stesso. Il dialogo costante con il personale qualificato sulla biologia delle frequenze, che opera in supporto anche a tutte le professioni sanitarie, è la formula innovativa di un legame di collaborazione duraturo, con tanta salute per tutti.



GAMMA ACCESSORI:

• Gli accessori opzionali. (variano in base alla composizione della macchina richiesta al momento dell'ordine).

OPZIONALE



Testina per Ultrasuoni da 40 mm.

OPZIONALE



Testina per Ultrasuoni da 40 mm. A puntale

OPZIONALE



Testina per Ultrasuoni da 50 mm.

OPZIONALE




Fasce elastiche

OPZIONALE



Testina per Magneto Light

OPZIONALE

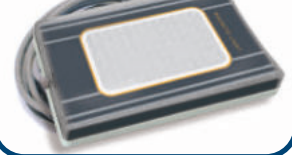

Diffusore Magneto Light

OPZIONALE




Manipolo per Laser

OPZIONALE



Diffusore Magneto/Laser Light

OPZIONALE

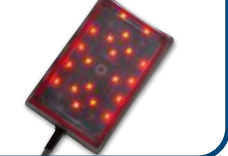

Solenoido con Laser Light per magnetoterapia alta e bassa frequenza

OPZIONALE




Fascia Laser Light 120 led infrarosso

OPZIONALE



Kit da 4 elettrodi rettangolari autoadesivi misure: 45x80 mm.

OPZIONALE

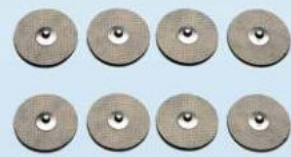

Kit da 4 elettrodi tondi autoadesivi per viso diametro 32 mm.

OPZIONALE



Ciabatte conduttive Monipolari

OPZIONALE



Kit fasce ed elettrodi: 6 fasce elastiche 12 elettrodi in pelle di daino




Cuscino con 2 solenoidi per magnetoterapia



Gel arnica per ultrasuono

OPZIONALE

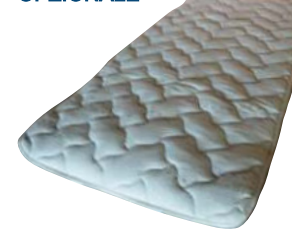

Topper in Celliant per magnetoterapia Alta Frequenza

OPZIONALE



Topper materasso x terapia durante il sonno con 12 solenoidi (imbottitura memory + gel). Il confort generato da questo topper permette di poter fare la terapia durante le ore del sonno unendo l'utile al dilettevole

NEW FLY

PROGRAMMI ESTETICI-BENESSERE
ULTRASUONI




PROGRAMMI BENESSERE

ACNE E BRUFOLI

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	12 minuti


PROGRAMMA	01
-----------	----

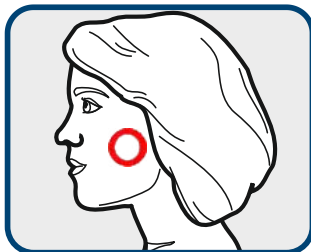

CELLULITE ARTI INFERIORI

FREQUENZA	1-3 MHz
POTENZA	1,5-2 W
EMISSIONE	puls. 75%
DURATA MAX	12 minuti


PROGRAMMA	08
-----------	----

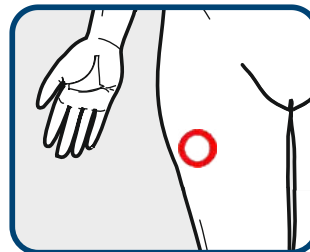

CELLULITE ADDOME

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2-2,5 W
EMISSIONE	puls. 50-75%
DURATA MAX	12 minuti


PROGRAMMA	07
-----------	----

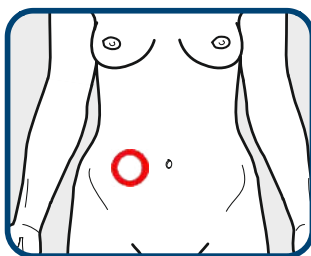

CELLULITE ARTI SUPERIORI

FREQUENZA	1-3 MHz
POTENZA	1-1,5 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA MAX	12 minuti


PROGRAMMA	09
-----------	----

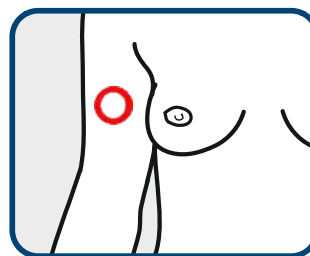

CELLULITE GLUTEI

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2-2,5 W
EMISSIONE	puls. 75-90%
DURATA MAX	12 minuti

PROGRAMMA	10
-----------	----

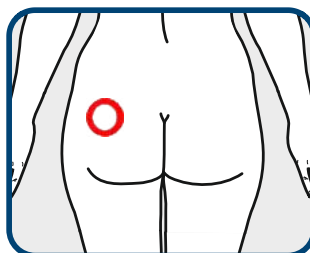

GUIDA AI PROGRAMMI ESTETICI

Note applicative per utilizzare correttamente l'apparecchio, sapendo quale programma scegliere e l'azione che esso svolge, combattendo così il proprio inestetismo il più efficacemente possibile.

URTO

AZIONE	L'irradiazione ultrasonica in questa azione determina un massaggio di notevole intensità, che per mezzo delle oscillazioni penetra più in profondità nell'epidermide.
QUANDO	Va utilizzato in tutti quegli stadi avanzati di cellulite localizzata, specialmente nel caso di cellulite molle o flaccida.

MODELLANTE

AZIONE	Questa terapia viene utilizzata ampiamente nei casi di lipodistrofie localizzate rompendo il tessuto fibronico presente che ostacola la circolazione sia ematica che linfatica.
QUANDO	Beneficiando della sua caratteristica nel modellare e stimolare è particolarmente indicato nel caso di cellulite dura o solida.

MANTENIMENTO

AZIONE	Il suo effetto stimolante sulla circolazione sanguigna distrettuale, migliora il trofismo cutaneo e l'ossigenazione cellulare, liberando i liquidi in eccesso e le tossine del connettivo sottocutaneo.
QUANDO	E' indicato come mantenimento del ciclo di sedute svolte, per non perdere i risultati raggiunti.

LEVIGANTE

AZIONE	Richiama il plasma pulito in tutto lo spessore del derma e ridona la giusta dimensione fisiologica al connettivo cutaneo, migliorando sia l'elasticità che l'irregolarità superficiale della epidermide.
QUANDO	E' indicato in tutti quegli inestetismi cellulitici nei quali la superficie cutanea presenta delle irregolarità, come la classica "Pelle a buccia d'arancia" e "Pelle Ruvida".

RIATTIVANTE

AZIONE	Stimola e riattiva la circolazione sanguigna e linfatica per un miglioramento cutaneo, riattivando il metabolismo cellulare, favorendo lo scambio di liquidi tra le cellule.
QUANDO	E' indicato soprattutto negli stadi iniziali della cellulite, in quanto stimola e riattiva il metabolismo assopitosi.

DRENANTE

AZIONE	La sua azione benefica facilita il drenaggio dei connettori linfatici e delle rispettive stazioni ghiandolari annesse, facilitando il riassorbimento dei liquidi.
QUANDO	Beneficiando della sua azione drenante è consigliato nel caso di cellulite edematosa, essendone i liquidi la principale causa. Consigliato contro la "Pelle a buccia d'arancia".

VEICOLANTE

AZIONE	Favorisce la penetrazione di creme, gel o altri prodotti nel tessuto biologico, favorendone l'assorbimento e quindi il loro effetto, indicato anche per trattamenti depilatori.
--------	---

ESFOLIANTE PER IL VISO

AZIONE	Riattiva la circolazione e favorisce il ricambio cellulare: la pelle viene purificata in profondità e preparata ad assorbire meglio i principi attivi di creme idratanti e antirughe. L'azione esfoliante ha effetti benefici anche sui punti neri che con le onde ultrasoniche si riducono o addirittura scompaiono. Il trattamento va eseguito una volta la giorno.
--------	---

MASSAGGIO PER IL VISO

AZIONE	Incrementa l'elasticità e il tono dei tessuti riducendo la possibile formazione di cicatrici post acne e aumenta l'effetto di prodotti anti acne. Il trattamento va eseguito una volta al giorno
--------	--

LEVIGANTE PER IL VISO


AZIONE	Leviga e distende le rughe (di espressione) e se usato in maniera preventiva può ritardare l'invecchiamento della pelle o impedire che si aggravi. L'ultrasuono grazie ai suoi effetti termici riscalda i tessuti e favorisce processi biochimico e metabolici. Il trattamento va eseguito una volta al giorno
--------	--



PROGRAMMI ESTETICI


ADDOME

AZIONE	PROG.
URTO	51
MODELLANTE	52
MANTENIMENTO	53

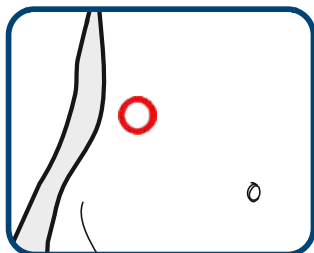


ESTERNO BRACCIA

AZIONE	PROG.
URTO	64
MODELLANTE	65
MANTENIMENTO	66

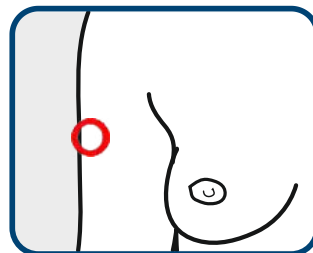


ANTI-AGE

AZIONE	PROG.
---	54

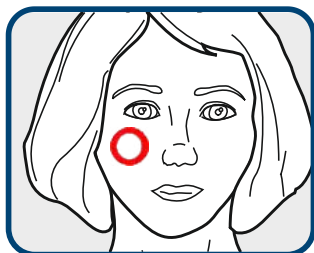


ESTERNO COSCE

AZIONE	PROG.
URTO	67
MODELLANTE	68
MANTENIMENTO	69

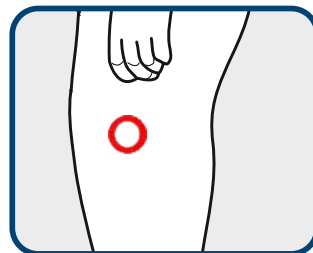


BUCCIA D'ARANCIA

AZIONE	PROG.
DRENANTE	55
LEVIGANTE	56
MANTENIMENTO	57

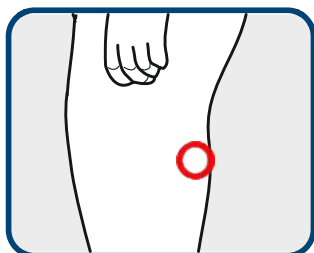


FIANCHI E SCHIENA

AZIONE	PROG.
URTO	70
MODELLANTE	71
MANTENIMENTO	72

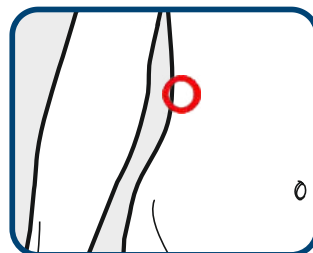


CULOTTES CHEVAL

AZIONE	PROG.
URTO	58
MODELLANTE	59
MANTENIMENTO	60

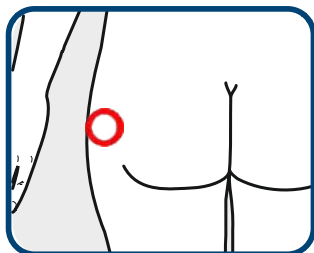


GINOCCHIA

AZIONE	PROG.
URTO	73
MODELLANTE	74
MANTENIMENTO	75

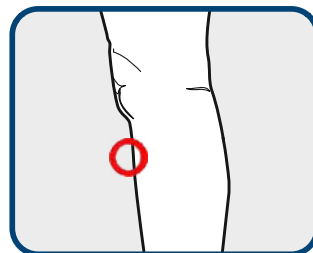


CUOIO CAPELLUTO

AZIONE	PROG.
STIMOLANTE	61
PULIZIA	62
ATTIVANTE	63

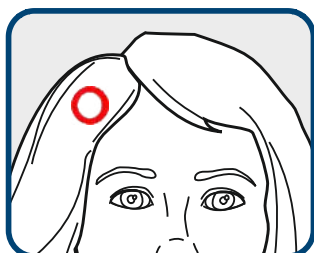

GLUTEI


AZIONE	PROG.
URTO	76
MODELLANTE	77
MANTENIMENTO	78

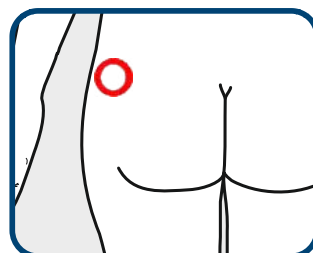

PROGRAMMI ESTETICI


INTERNO BRACCIA

AZIONE	PROG.
URTO	79
MODELLANTE	80
MANTENIMENTO	81

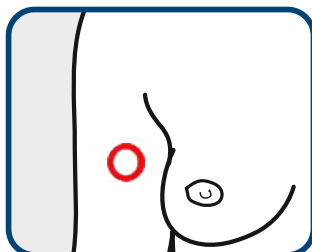


POLPACCI

AZIONE	PROG.
URTO	92
MODELLANTE	93
MANTENIMENTO	94

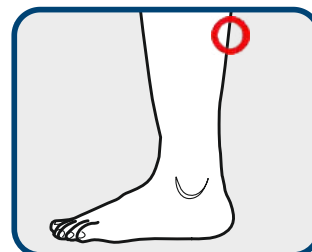


INTERNO COSCE

AZIONE	PROG.
URTO	82
MODELLANTE	83
MANTENIMENTO	84

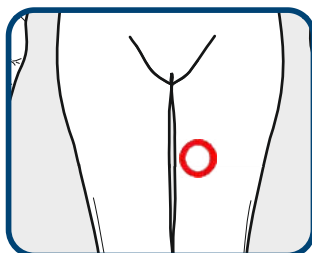


UOMO

AZIONE	PROG.
URTO	95
MODELLANTE	96
MANTENIMENTO	97

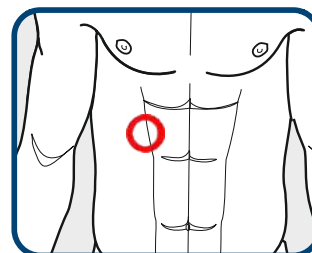


INTERNO GINOCCHIA

AZIONE	PROG.
URTO	85
MODELLANTE	86
MANTENIMENTO	87

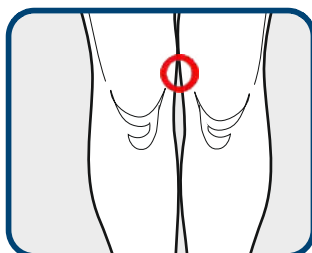


RIGENERAZIONE TESSUTI CUTANEI

AZIONE	PROG.
---	98

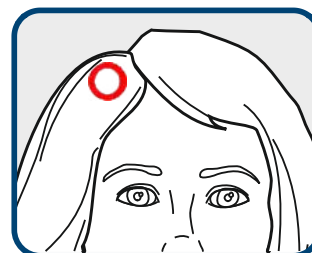


MACCHIE DELLA PELLE

AZIONE	PROG.
---	88

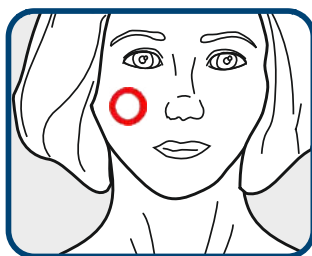


TRATTAMENTO ACNE

AZIONE	PROG.
---	99

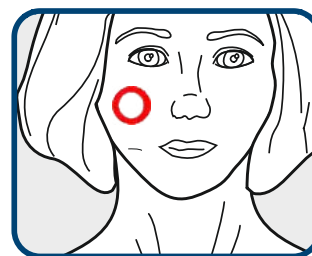


PELLE RUVIDA

AZIONE	PROG.
RIATTIVANTE	89
LEVIGANTE	90
MANTENIMENTO	91

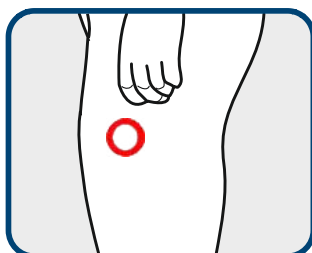

TRATTAMENTO ANTIRUGHE


AZIONE	PROG.
---	100

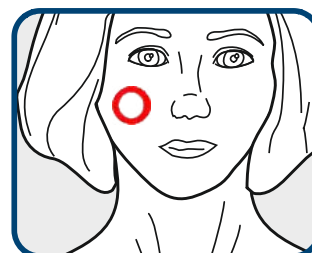

PROGRAMMI ESTETICI

TRATTAMENTO COUPEROSE


AZIONE	PROG.
---	101

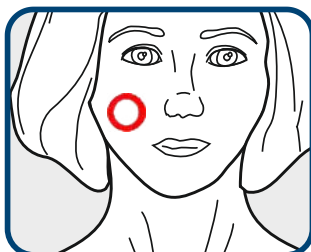

V-SONO PLUS


AZIONE	PROG.
TRATT. FORTE	110

Il programma consente anche di verificare il corretto funzionamento del manipolo di trattamento. Se si hanno in dotazione altri accessori opzionali, con questo programma si può controllare il loro corretto funzionamento.

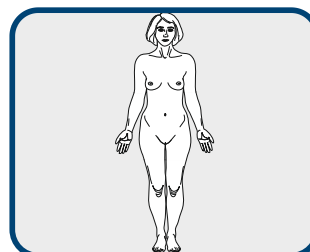


TRATTAMENTO SMAGLIATURE

AZIONE	PROG.
---	102

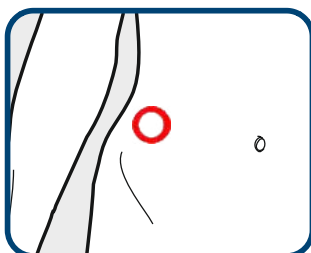


TRATTAMENTO VENE VARICOSE

AZIONE	PROG.
---	103

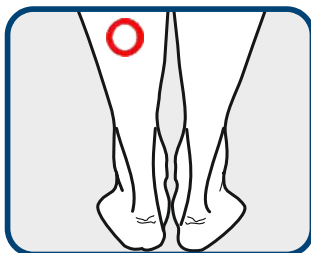


VISO

AZIONE	PROG.
ESFOLIANTE	104
MASSAGGIO	105
LEVIGANTE	106

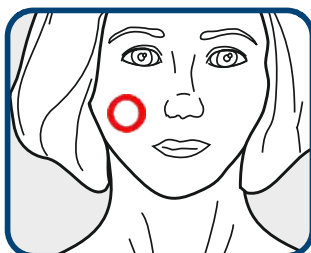

VEICOLANTE

AZIONE	PROG.
ALTO	107
MEDIO	108
BASSO	109

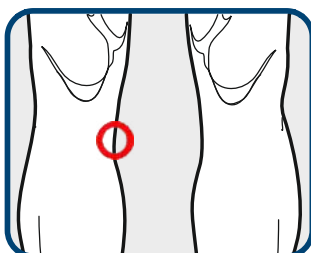



PROGRAMMI ESTETICI E BENESSERE **MAGNETO PLUS**



Informazioni

PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE SINISTRA DELLA MACCHINA.



Informazioni

SELEZIONATO IL PROGRAMMA E' POSSIBILE REGOLARE LA POTENZA
PREMENDO IL PULSANTE "+" E "-".
METTENDO IL PROGRAMMA IN PAUSA E' POSSIBILE IMPOSTARE IL
TEMPO DI LAVORO CON I PULSANTI "▲ / ▼".


PROGRAMMI ESTETICI / BENESSERE

RECUPERO SPORT

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 21

Consigliato accessorio lettino
Total Body

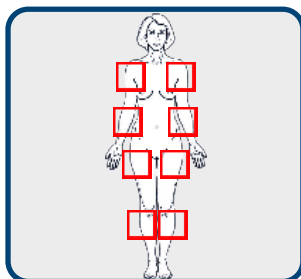


IPERATTIVITA'

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 30

Consigliato accessorio lettino
Total Body

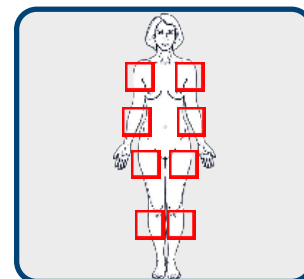


ENERGIA

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 22


Consigliato accessorio lettino
Total Body

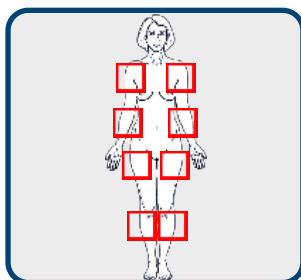

DEFICIT ATTENZIONE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 32

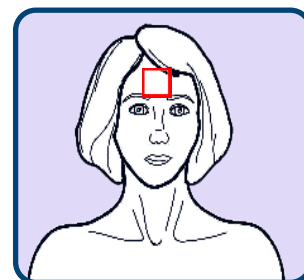


DISINTOSSICANTE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 23


Consigliato accessorio lettino
Total Body

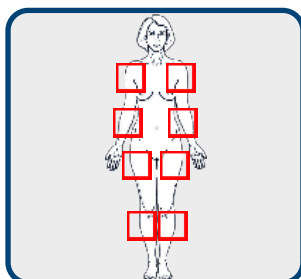

MAL DI DENTI

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 34

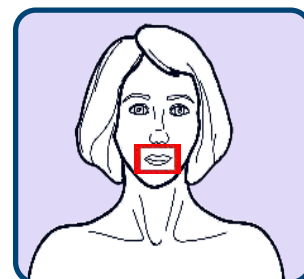


SONNO

DURATA 480 minuti

PROGRAMMA 26


Consigliato accessorio lettino
Total Body

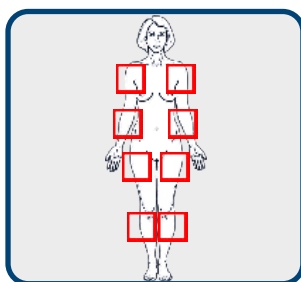

RINNOVAMENTO TISSUTALE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 36

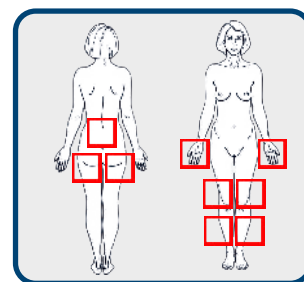

DEFICIT POSTURALE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 28

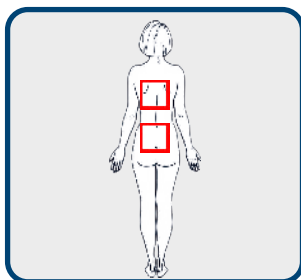

DOLORI MESTRUALI

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 44

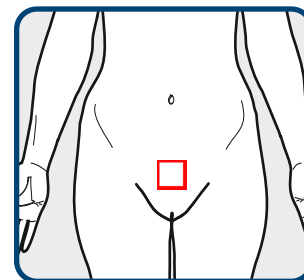

PROGRAMMI ESTETICI / BENESSERE


ESTRAZIONE DENTE PRIMA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	46

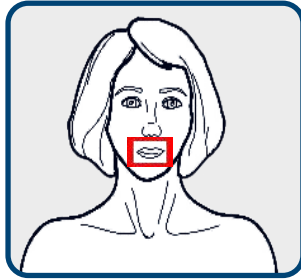


PARODONTOSI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	52

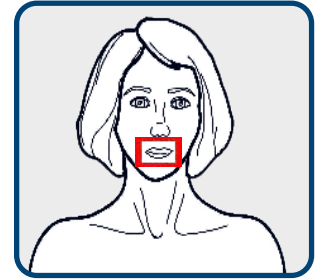


ESTRAZIONE DENTE DOPO

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	47

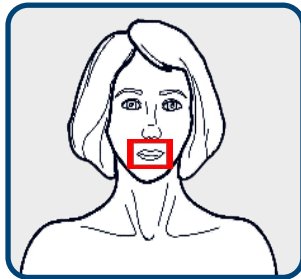


INFIAMMAZIONE FASCIO VASCOLARE NERVOSO

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	54

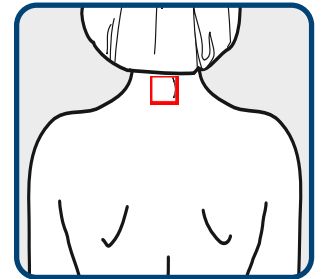


IMPIANTO PRIMA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	48

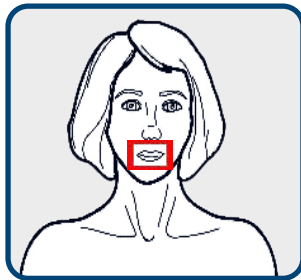


INFIAMMAZIONE PROSTATA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	56

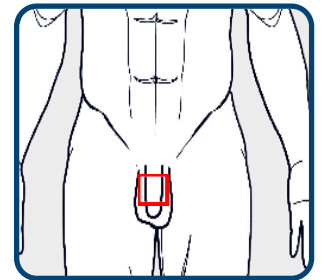


IMPIANTO DOPO

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	49

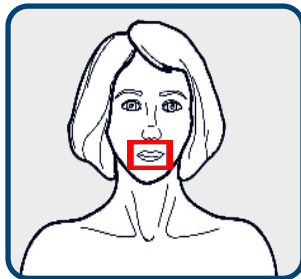


EMICRANIA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	57

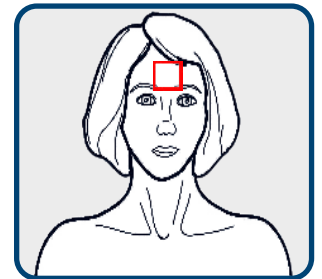


ENURESIS NOTTURNA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	51

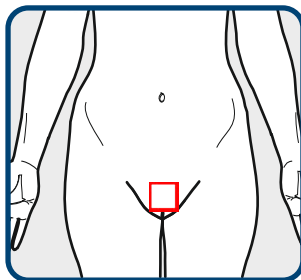

VERTIGINI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	58

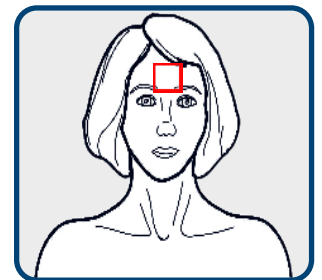


PROGRAMMI ESTETICI / BENESSERE

RECUPERO ATLETI

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 59


Consigliato accessorio lettino
Total Body

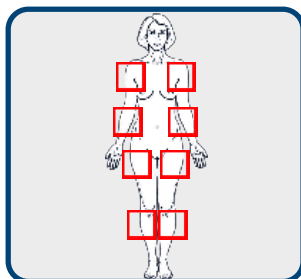

CELLULITE EDEMATOSA

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 64

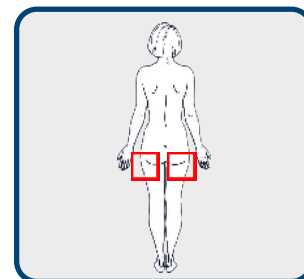

STIPSI

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 60

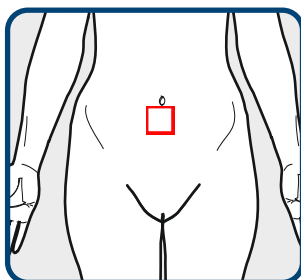

CELLULITE ADIPOSA

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 65

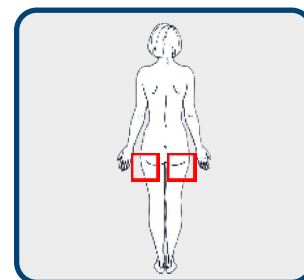

ASTENIA DEPRESSIVA

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 61

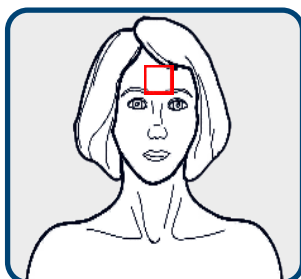

ACNE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 66

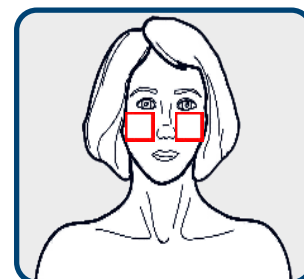

CELLULITE COMPATTA

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 62

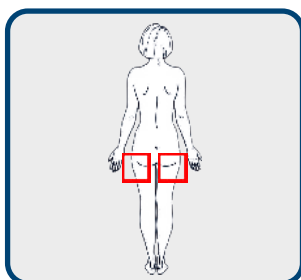


DEFICIT IMMUNITARIO

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 67


Consigliato accessorio lettino
Total Body

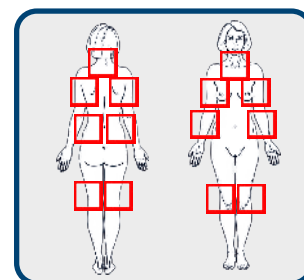

CELLULITE MOLLE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 63

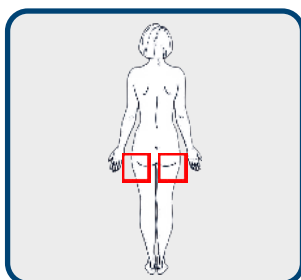

SMAGLIATURE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 68

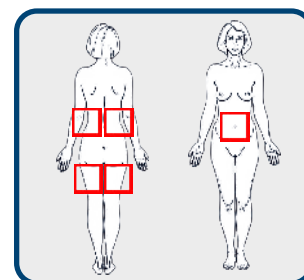


PROGRAMMI ESTETICI / BENESSERE

LACERAZIONE PELLE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 69


Consigliato accessorio lettino
Total Body

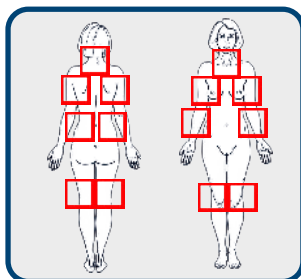

FLEBITI

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 74

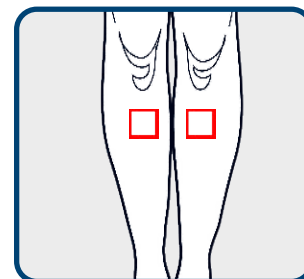


METABOLISMO LENTO

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 70

Consigliato accessorio lettino
Total Body

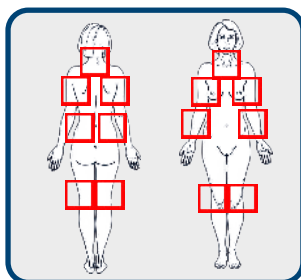


FISTOLE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 75

Consigliato accessorio lettino
Total Body

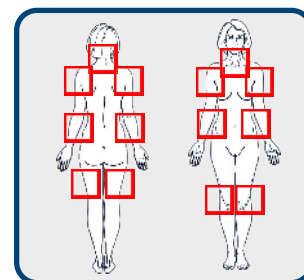


PIAGHE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 71


Consigliato accessorio lettino
Total Body

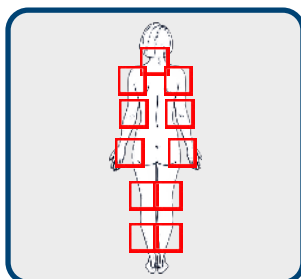

VENE VARICOSE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 76

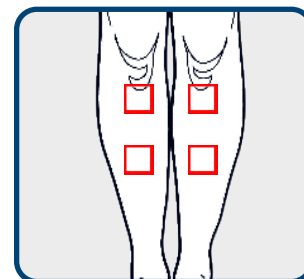

ENDOMETRIOSI

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 72

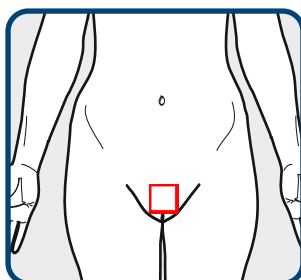

AZIONE ANTI-AGE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 81

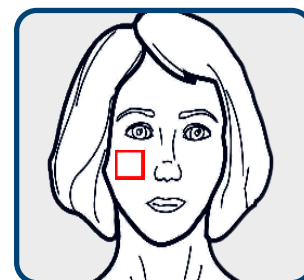

CISTITE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 73

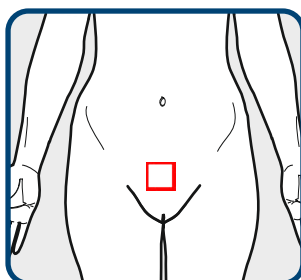

ANTIRUGHE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 84

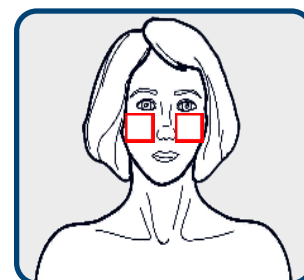

DOMANDE E RISPOSTE

Informazioni

Quando si può usare l'apparecchio?

L'apparecchio si può usare in qualsiasi momento della giornata. Consigliamo di ritagliarsi un momento della giornata, per potersi dedicare esclusivamente al trattamento, senza doversi occupare di qualsiasi altra cosa.

Se usati spesso gli ultrasuoni possono recare danno?

Le applicazioni di ultrasuoni non creano alcun danno se non nei casi controindicati (vedere il capitolo "Controindicazioni"). E' opportuno comunque attenersi a quanto indicato evitando azioni esasperate o applicazioni troppo frequenti che potrebbero risultare controproducenti.

Se si aumenta la potenza si ottengono più risultati?

NO! L'apparecchio è dotato di programmi specifici che prevedono già il livello ottimale di potenza da utilizzare.

In quando tempo si possono vedere i primi risultati?

Dipende; nella maggior parte dei casi, anche dalle prime applicazioni. Si deve comunque considerare che la reattività dell'individuo è soggettiva e varia da persona a persona. Si consiglia di non desistere dalle applicazioni.

L'apparecchio è dotato di una esclusiva funzione, che permette di agire su qualsiasi tipo di problema, con la massima efficacia. In particolare per i trattamenti anticellulite i risultati sono dipendenti dallo stadio di avanzamento dell'inetetismo, comunque selezionando con la tastiera il trattamento più idoneo, si potrà apprezzare dopo l'applicazione un primo risultato, una pelle più liscia e vellutata al tatto.

I risultati successivi si vedranno presto, tenendo però in considerazione che la cellulite, in alcuni casi, necessita di un minimo di due cicli completi di applicazioni all'anno (primavera e autunno).

Si consiglia di bere abbondantemente acqua, possibilmente non gasata, adottare un regime alimentare appropriato e una blanda ma continuativa attività fisica (passeggiate e bicicletta) evitando sia diete drastiche che sforzi eccessivi e troppo prolungati.

Se durante il trattamento non si avverte nulla o non si percepisce una continua e leggera vibrazione, cosa significa?

Significa che la zona in questione è meno sensibile, ma ciò non vuol dire che l'onda selettiva ultrasonora non stia esplicando la sua funzione.

Quando si può utilizzare il programma di mantenimento?

Si consiglia di utilizzare il programma di mantenimento alternandolo ad ogni tre applicazioni di trattamento specifico, fino a quando non si otterranno risultati soddisfacenti. In seguito si può utilizzare questo programma ogni volta che lo si desidera.

Si possono fare più trattamenti sulla stessa zona più volte al giorno?

Qual'è il tempo massimo di utilizzo giornaliero consigliato?

Si consiglia l'utilizzo giornaliero di una durata massima di 12 minuti per ogni zona corporea (i programmi con durata 6 minuti si possono ripetere anche 2 volte).

Posso tenere ferma la testina di trattamento ?

NO! Se la testina non viene fatta scorrere, la parte in trattamento potrebbe raggiungere un surriscaldamento, sia fastidioso che di negativo effetto. Quindi è necessario seguire il metodo di applicazione indicato, per eseguire trattamenti sicuri, altrimenti si limiterebbe l'efficacia dell'azione degli ultrasuoni ad un solo punto, mentre è opportuno agire su tutta la zona circostante, riattivando la circolazione su tutta la zona trattata.

Devo sempre applicare il gel o la crema sulla testina di trattamento e sulla pelle?

SI! e in quantità sufficiente per tutta la zona interessata all'applicazione, altrimenti gli ultrasuoni non vengono trasmessi e la testina di trattamento potrebbe scaldarsi troppo e non esplicare il suo effetto e cosa più importante creare fastidio sulla pelle.

Come faccio a sapere se la testina funziona in modo corretto?

Se avete dubbi sul corretto funzionamento e produzione di ultrasuoni (suoni non udibili dall'orecchio umano) selezionare il programma 110 denominato "V-SONO PLUS TRATTAMENTO FORTE" e lasciare cadere sulla testina qualche goccia di acqua che apparirà in movimento, sembrerà friggere oltre a presentare una lieve evaporazione se inserito il manipolo grande.

Se non accade nulla si veda il capitolo "Risoluzione dei problemi" nel manuale: *Programmi Terapeutici*.

Come posso pulire la testina di trattamento dopo ogni applicazione?

La pulizia della testina di trattamento è estremamente importante e deve essere scrupolosamente eseguita dopo ogni applicazione. I residui di gel o creme fatte seccare possono indurre la nascita di batteri e muffe, oltre a limitare il corretto funzionamento del trasduttore ultrasonico incorporato nella testina. Per la pulizia seguire quanto indicato nel capitolo "Pulizia" nel manuale: *Programmi Terapeutici*.

Se la testina di trattamento presenta delle fessurazioni o il cavetto appare danneggiato, posso utilizzarli comunque?

NO, assolutamente! Dopo ogni trattamento occorre verificare la testina di trattamento come indicato nel capitolo "Manutenzione" nel manuale: *Programmi Terapeutici*.

Posso fare applicazioni su vene varicose?

SI! Se si applicano trattamenti Magneto Light.

NO! Se il trattamento è ad ultrasuoni. L'ultrasuono è assolutamente controindicato se si hanno gravi problemi circolatori. Può essere usato, comunque, per trattare altre zone del corpo non direttamente interessate.

Nei casi più gravi è opportuno rivolgersi ad un medico (vedere il capitolo "Controindicazioni" nel manuale: *Programmi Terapeutici*).

Ho un pace-maker, posso usare l'apparecchio?



Attenzione

NO! E' controindicato l'uso di apparecchi elettronici in generale alle persone portatrici di stimolatori cardiaci ed anche in presenza di elettrodi impiantati. E' opportuno consultare un medico (vedere il capitolo "Controindicazioni") nel manuale: *Programmi Terapeutici*.



PROGRAMMI ESTETICI-BENESSERE MAGNETO LIGHT


Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE DESTRA DELLA MACCHINA.
Informazioni	TENENDO PREMUTO IL PULSANTE START / STOP SUI PROGRAMMI LIBERI E' POSSIBILE CREARE UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO (vedi pag.16).

PROGRAMMI ESTETICI / BENESSERE

ACNE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 27

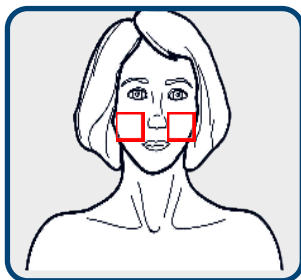

PROGRAMMA LIBERO 3 ML

PROGRAMMA 39


Impostare programma secondo indicazioni date da consulente o medico

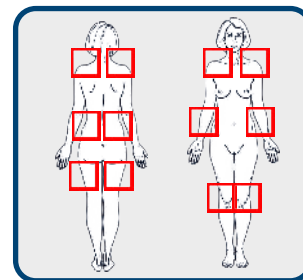

SMAGLIATURE

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 28

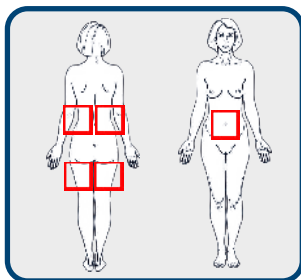

PROGRAMMA LIBERO 2 ML

PROGRAMMA 40

Impostare programma secondo indicazioni date da consulente o medico

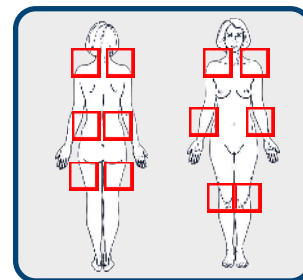


LACERAZIONE PELLE

DURATA 60 minuti

PROGRAMMA 29


Consigliato accessorio lettino Total Body

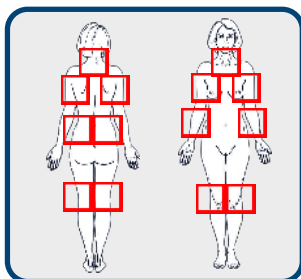

PROGRAMMA LIBERO 4 ML

PROGRAMMA 41


Impostare programma secondo indicazioni date da consulente o medico

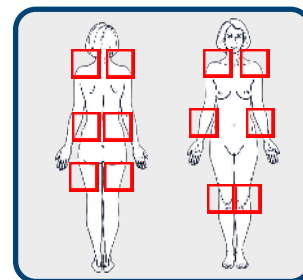

ENDOMETRIOSI

DURATA 60 minuti


PROGRAMMA 31

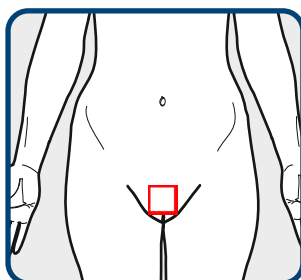

PROGRAMMA LIBERO 1 ML

PROGRAMMA 38

Impostare programma secondo indicazioni date da consulente o medico

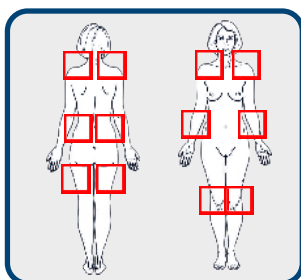

APPUNTI:



PROGRAMMI ESTETICI-BENESSERE
MAF THERAPY



PROGRAMMA DISPONIBILE NELLA SEZIONE DESTRA DELLA MACCHINA.

OPZIONALE




CELLIANT®

Materassino in fibra di Celliant
per trattamenti Alta Frequenza.

PROGRAMMA NOTTURNO

PROGRAMMA	35

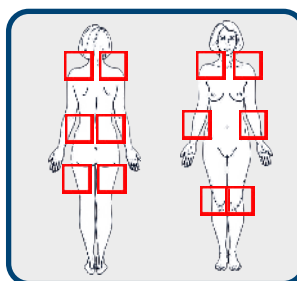




PROGRAMMI ESTETICI-BENESSERE LASER LIGHT

Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE DESTRA DELLA MACCHINA.
Informazioni	TENENDO PREMUTO IL PULSANTE START / STOP SUI PROGRAMMI LIBERI E' POSSIBILE CREARE UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO (vedi pag.20).

i Informazioni


Posizionare la fascetta sulla parte da trattare.

PROGRAMMA LASER	
PROGRAMMA	36

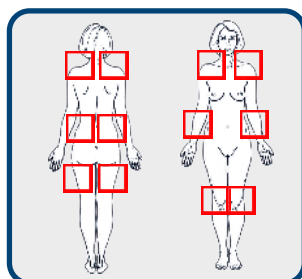

PROGRAMMA LASER LIBERO	
PROGRAMMA	37

Impostare programma secondo indicazioni date da consulente o medico

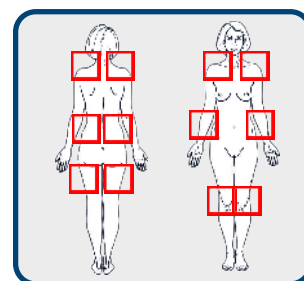

APPUNTI:



PROGRAMMI ESTETICI-BENESSERE SPORTIVI E.M.S.

Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE SINISTRA DELLA MACCHINA.
Informazioni	SELEZIONATO IL PROGRAMMA E' POSSIBILE REGOLARE LA POTENZA PREMENDO IL PULSANTE "+" E "-".

PROGRAMMI SPORTIVI E.M.S.

I programmi sportivi e di rafforzamento muscolare sono di natura prestazionale pensati per gli sportivi e non.

I programmi di stimolazione mirano al miglioramento di una qualità muscolare alla volta e si suggeriscono almeno 10-20 sedute dello stesso programma su di un medesimo gruppo muscolare.

L'efficacia della stimolazione dipende dall'obiettivo sportivo, dalle qualità e frequenze di sedute, dall'associazione dello strumento con altre metodiche.


I parametri di stimolazione dei programmi sportivi, di rafforzamento muscolare e di estetica muscolare sono il risultato di protocolli consolidati in medicina dello sport, medicina estetica e fisioterapia in funzione della fisiologia e delle diverse tipologie di fibre muscolari.

I programmi sono divisi per la stessa tipologia di allenamento in due gruppi arti superiori/tronco e arti inferiori/zona lombare, in più livelli crescenti come impegno muscolare.

Tutti i programmi sono preimpostati e divisi in più fasi fino ad un massimo di tre.

Alcuni programmi hanno una fase di riscaldamento prima del lavoro vero e proprio.

In questa fase si è scelta una frequenza endorfinica che varia da 1 a 6 Hz, al fine di aumentare la produzione di endorfine per ridurre il dolore ed aumentare l'afflusso sanguigno nel gruppo muscolare da trattare.

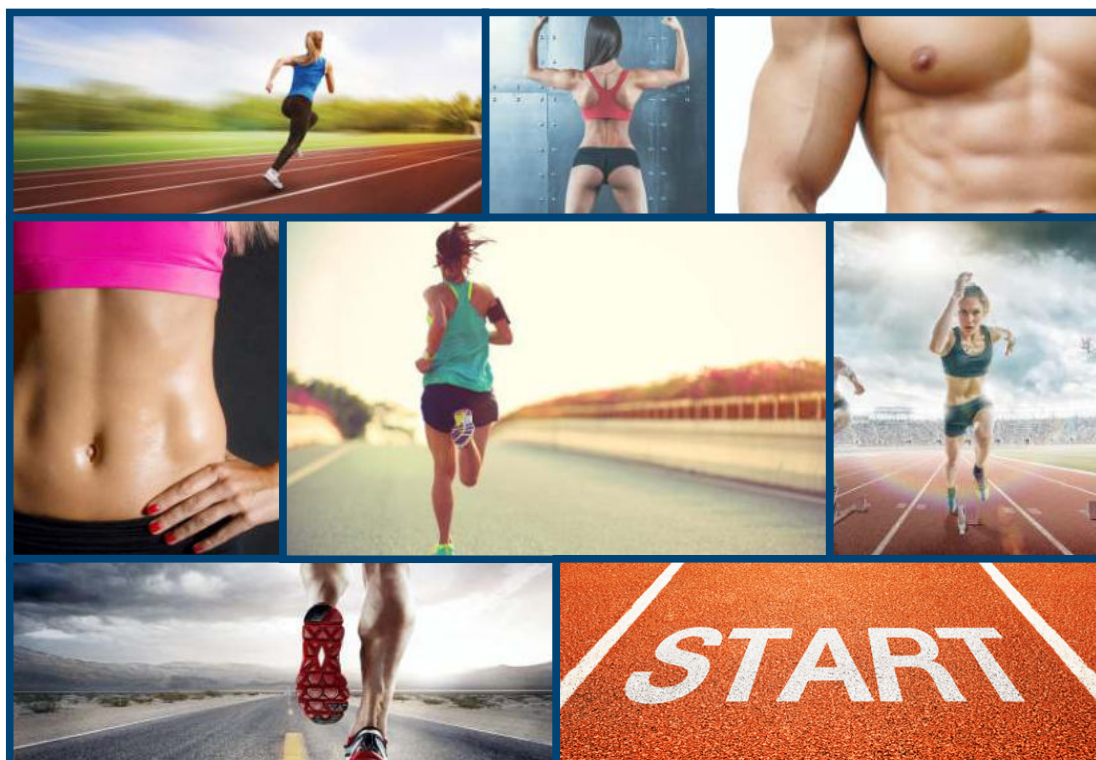

TRATTAMENTO: FORZA ARTI SUPERIORI

I parametri di stimolazione devono stimolare le fibre della forza (Tipo II) con frequenze che variano da 75 a 100 Hz con tempi di contrazione breve pari a 4 secondi, tali da raggiungere il tetto di forza sub-massimale massima e tempi di riposo sufficiente a permettere un adeguato recupero, pari a 20 secondi. Per ottimizzare la fase di riposo e aumentare l'afflusso sanguigno si utilizza una frequenza endorfinica di 5 Hz. Per ottenere risultati sull'incremento di forza si suggerisce un incremento graduale dell'intensità a partire dalla seconda seduta.

Il ciclo dovrà essere di almeno 10-20 sedute con una frequenza per esempio di 5 sedute la prima settimana, con decremento nelle successive (4 sedute la seconda settimana e 3 la terza).

Sono disponibili 5 livelli per la zona superiore e 5 per la zona inferiore che permettono un graduale incremento delle intensità nelle successive sedute. Il ciclo di stimolazione può essere ripetuto dopo un periodo di sospensione di almeno 20 giorni.

Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	LIVELLO 2
DURATA 20 minuti	DURATA 23 minuti
POTENZA MASSIMA 15%	POTENZA MASSIMA 25%
PROGRAMMA 01	PROGRAMMA 02

LIVELLO 3	LIVELLO 4
DURATA 25 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 35%	POTENZA MASSIMA 45%
PROGRAMMA 03	PROGRAMMA 04

LIVELLO 5
DURATA 32 minuti
POTENZA MASSIMA 55%
PROGRAMMA 05

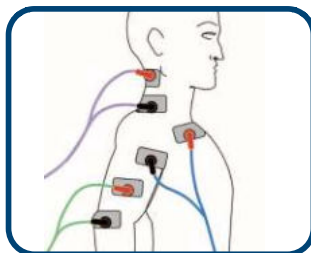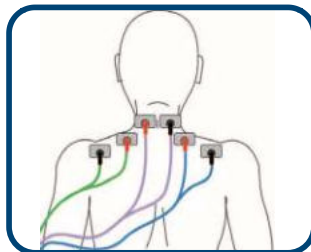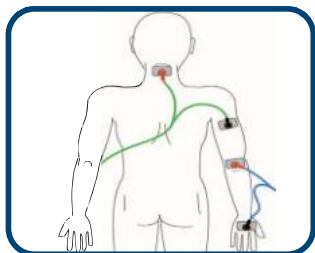

TRATTAMENTO: FORZA ARTI INFERIORI

Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	LIVELLO 2
DURATA 20 minuti	DURATA 23 minuti
POTENZA MASSIMA 15%	POTENZA MASSIMA 25%
PROGRAMMA 06	PROGRAMMA 07

LIVELLO 3	LIVELLO 4
DURATA 25 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 35%	POTENZA MASSIMA 45%
PROGRAMMA 08	PROGRAMMA 09

LIVELLO 5
DURATA 32 minuti
POTENZA MASSIMA 55%
PROGRAMMA 10

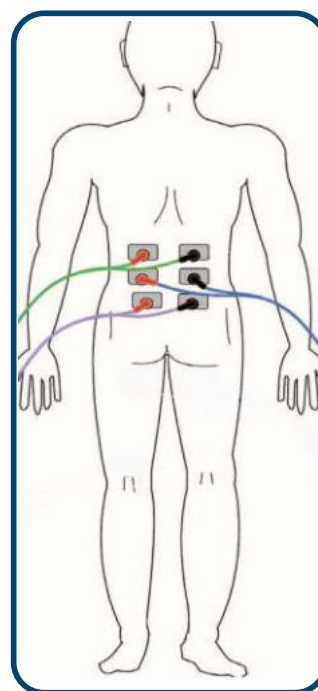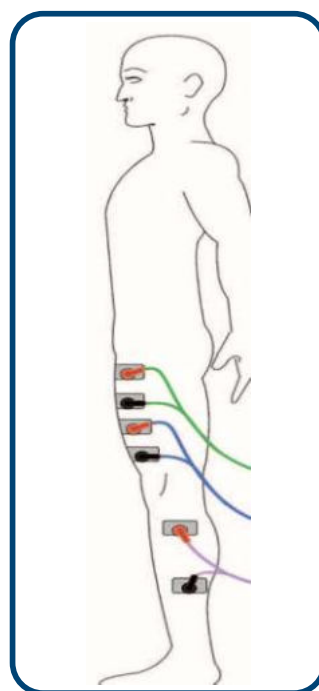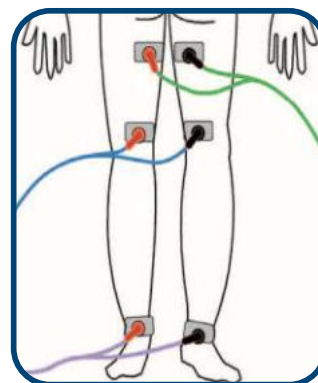

TRATTAMENTO: FORZA ESPLOSIVA ARTI SUPERIORI

I parametri di stimolazione devono stimolare le fibre della forza esplosiva con frequenze che variano da 90 a 120 Hz con tempi di contrazione breve pari a 3 secondi, tali da raggiungere il tetto di forza massima e tempi di riposo sufficiente a permettere un adeguato recupero, pari a 30 secondi

Per ottimizzare la fase di riposo e aumentare l'afflusso sanguigno si utilizza una frequenza di 1 Hz. Per ottenere risultati sull'incremento di forza si suggerisce un incremento graduale dell'intensità a partire dalla seconda seduta. Il ciclo dovrà essere di almeno 10-20 sedute con una frequenza per esempio di 5 sedute la prima settimana, con decremento nelle successive (4 sedute la seconda settimana e 3 la terza).

Sono disponibili 5 livelli per la zona superiore e 5 per la zona inferiore che permettono un graduale incremento delle intensità nelle successive sedute. Il ciclo di stimolazione può essere ripetuto dopo un periodo di sospensione di almeno 20 giorni.

Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	LIVELLO 2
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 15%	POTENZA MASSIMA 25%
PROGRAMMA 11	PROGRAMMA 12

LIVELLO 3	LIVELLO 4
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 35%	POTENZA MASSIMA 45%
PROGRAMMA 13	PROGRAMMA 14

LIVELLO 5
DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 55%
PROGRAMMA 15

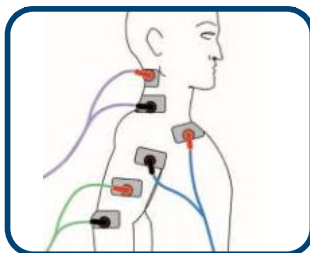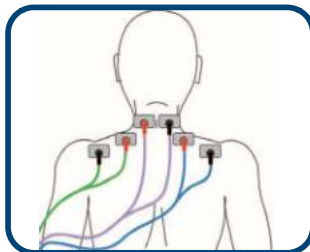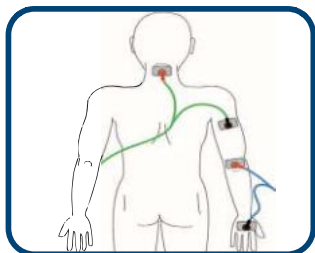

TRATTAMENTO: FORZA ESPLOSIVA ARTI INFERIORI

Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	LIVELLO 2
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 15%	POTENZA MASSIMA 25%
PROGRAMMA 16	PROGRAMMA 17

LIVELLO 3	LIVELLO 4
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 35%	POTENZA MASSIMA 45%
PROGRAMMA 18	PROGRAMMA 19

LIVELLO 5
DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 55%
PROGRAMMA 20

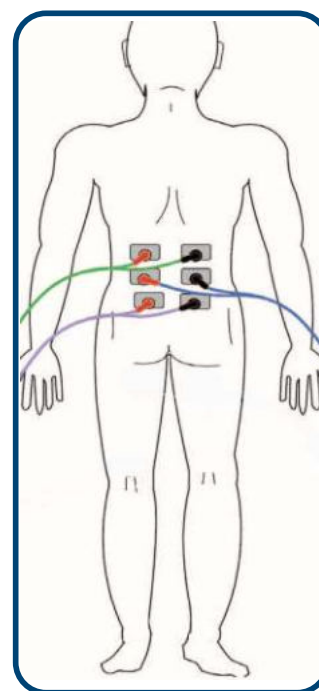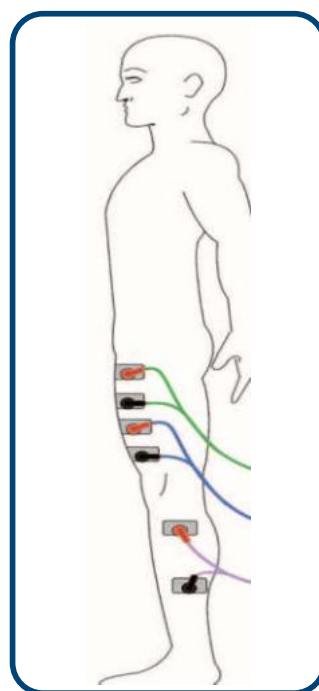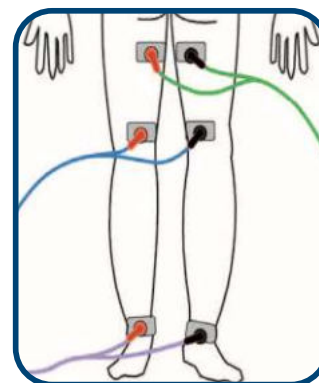

TRATTAMENTO: FORZA RESISTENTE ARTI SUPERIORI

I parametri di stimolazione devono stimolare le fibre intermedie della resistenza deputate a sforzi intensi e prolungati (Tipo IIa e IIb) con frequenze che variano da 50 a 75 Hz con tempi di contrazione pari a 8 secondi, tali da raggiungere uno sforzo intenso e protratto per un medio periodo e tempi di riposo breve pari a 8 secondi. Per ottimizzare la fase di riposo e aumentare l'afflusso sanguigno si utilizza una frequenza di 5 Hz. Per ottenere risultati sull'incremento di forza si suggerisce un incremento graduale dell'intensità a partire dalla seconda seduta. Il ciclo dovrà essere di almeno 10-20 sedute con una frequenza per esempio di 5 sedute la prima settimana, con decremento nelle successive (4 sedute la seconda settimana e 3 la terza) Sono disponibili 5 livelli per la zona superiore e 5 per la zona inferiore che permettono un graduale incremento delle intensità nelle successive sedute. Il ciclo di stimolazione può essere ripetuto dopo un periodo di sospensione di almeno 20 giorni.

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




! Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	LIVELLO 2
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 15%	POTENZA MASSIMA 25%
PROGRAMMA 21	PROGRAMMA 22

LIVELLO 3	LIVELLO 4
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 35%	POTENZA MASSIMA 45%
PROGRAMMA 23	PROGRAMMA 24

LIVELLO 5
DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 55%
PROGRAMMA 25

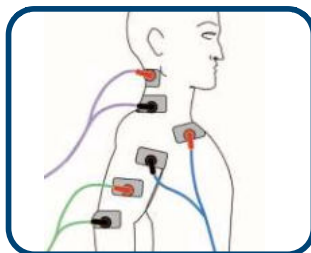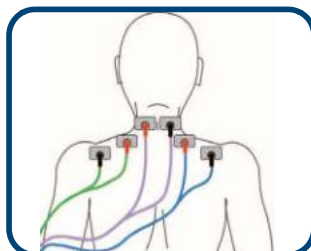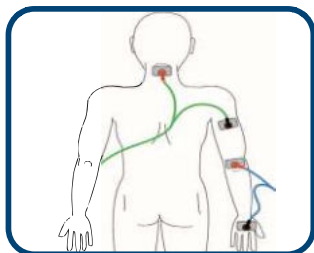

TRATTAMENTO: FORZA RESISTENTE ARTI INFERIORI

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




! Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	LIVELLO 2
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 15%	POTENZA MASSIMA 25%
PROGRAMMA 26	PROGRAMMA 27

LIVELLO 3	LIVELLO 4
DURATA 30 minuti	DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 35%	POTENZA MASSIMA 45%
PROGRAMMA 28	PROGRAMMA 29

LIVELLO 5
DURATA 30 minuti
POTENZA MASSIMA 55%
PROGRAMMA 30

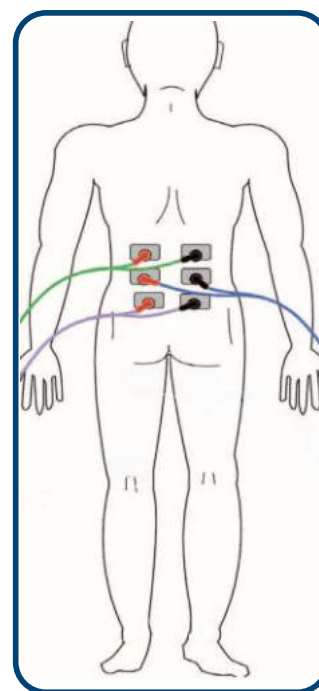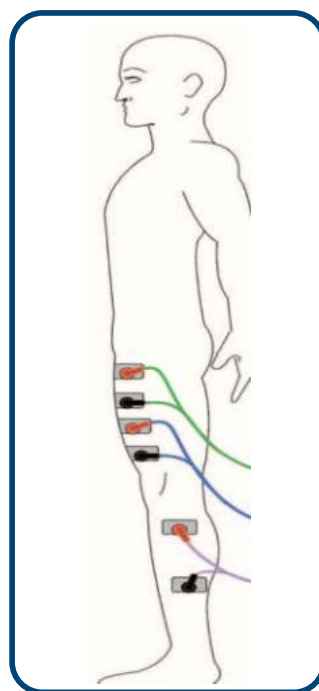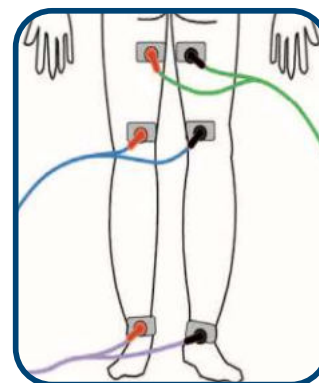

TRATTAMENTO: RESISTENZA AEROBICA ARTI SUPERIORI

I parametri di stimolazione devono stimolare le fibre lente, deputate a sforzi prolungati (Tipo I) con frequenze che variano da 10 a 18 Hz con tempi di contrazione pari a 10 secondi, tali da raggiungere uno sforzo medio per un medio periodo e tempi di riposo breve pari a 4 secondi.

Per ottimizzare la fase di riposo e aumentare l'afflusso sanguigno si utilizza una frequenza non tetanizzante di 5 Hz. Per ottenere risultati sull'incremento di forza si suggerisce un incremento graduale dell'intensità a partire dalla seconda seduta.

Il ciclo dovrà essere di almeno 10-20 sedute con una frequenza per esempio di 5 sedute la prima settimana, con decremento nelle successive (4 sedute la seconda settimana e 3 la terza) Sono disponibili 3 livelli per la zona superiore e 3 per la zona inferiore che permettono un graduale incremento delle intensità nelle successive sedute. Il ciclo di stimolazione può essere ripetuto dopo un periodo di sospensione di almeno 20 giorni.

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




! Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	
DURATA	55 minuti
POTENZA MASSIMA	15%
PROGRAMMA	31

LIVELLO 2	
DURATA	55 minuti
POTENZA MASSIMA	25%
PROGRAMMA	32

LIVELLO 3	
DURATA	55 minuti
POTENZA MASSIMA	35%
PROGRAMMA	33

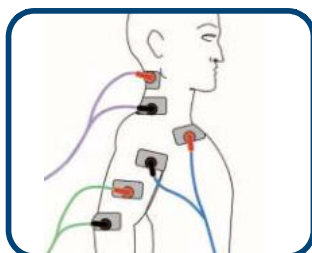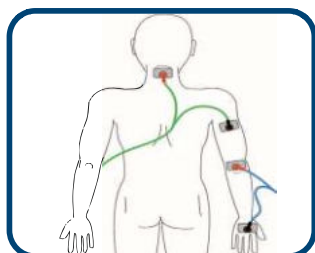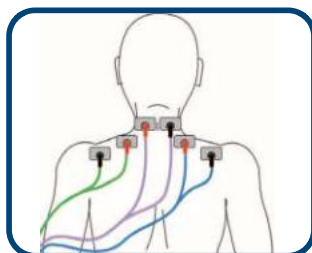

TRATTAMENTO: RESISTENZA AEROBICA ARTI INFERIORI

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.




! Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

LIVELLO 1	
DURATA	55 minuti
POTENZA MASSIMA	15%
PROGRAMMA	34

LIVELLO 2	
DURATA	55 minuti
POTENZA MASSIMA	25%
PROGRAMMA	35

LIVELLO 3	
DURATA	55 minuti
POTENZA MASSIMA	35%
PROGRAMMA	36

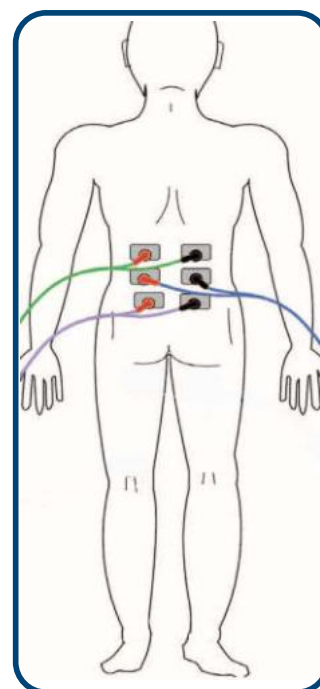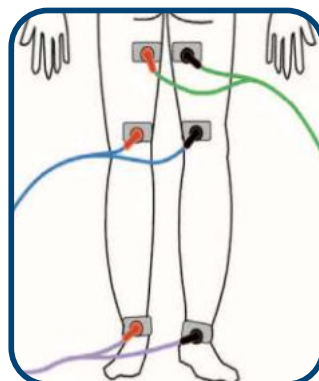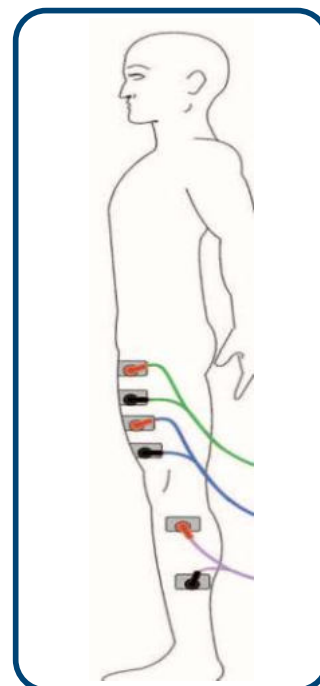

TRATTAMENTO: RECUPERO ATTIVO ARTI SUPERIORI

Dopo un'intensa attività, allenamento o gara, il problema maggiormente sentito dagli atleti è il recupero del gruppo muscolare, che ha accumulato del lattato.

La sensazione è di indolenza e di vero e proprio dolore muscolare.

Per recuperare rapidamente si suggerisce un lavoro muscolare leggero per almeno 20/30 minuti.

Ciò migliorerà il flusso sanguigno, l'ossigenazione muscolare e si accelera il metabolismo lattato.

Il recupero attivo permette di ridurre l'insorgere delle contratture e degli indolenzimenti e permette delle condizioni migliori per la gara o allenamento successivo.

Il trattamento di recupero con la stimolazione muscolare ha il vantaggio di salvaguardare il sistema muscolo-tendineo da ulteriori sforzi e soprattutto di risparmiare fatica fisica e psicologica. Il protocollo è con frequenze decrescenti da 9 a 1 Hz.

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.

! Attenzione




L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

ARTI SUPERIORI

DURATA 18 minuti

POTENZA MASSIMA 15%

PROGRAMMA 37

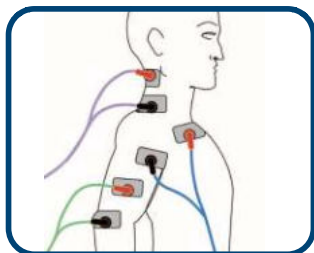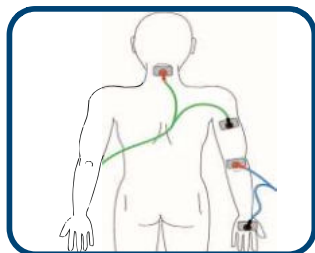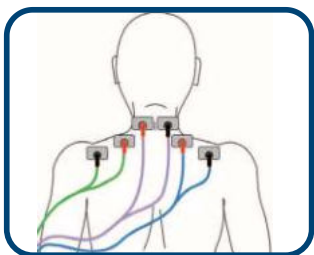

TRATTAMENTO: RECUPERO ATTIVO ARTI INFERIORI

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.

! Attenzione




L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

ARTI INFERIORI

DURATA 18 minuti

POTENZA MASSIMA 15%

PROGRAMMA 38

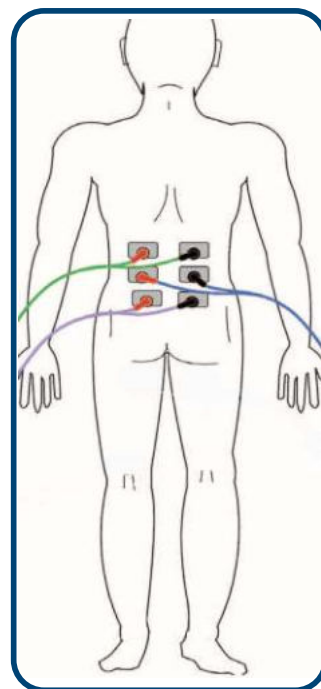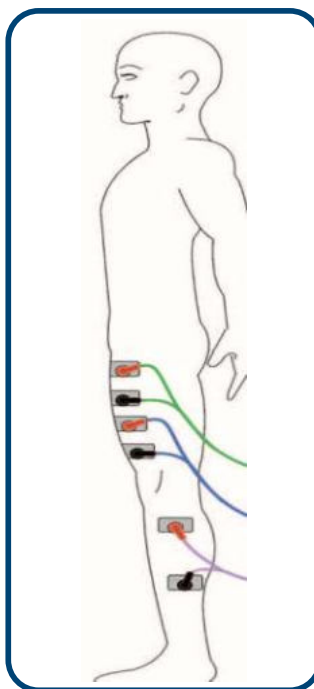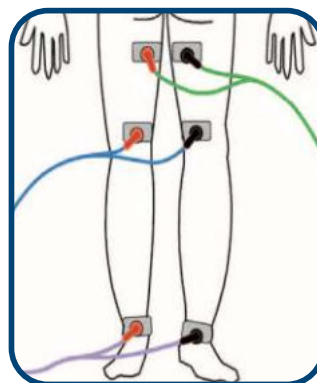

TRATTAMENTO: CAPILLARIZZAZIONE ARTI SUPERIORI

La stimolazione a frequenze non tetanizzanti sviluppa un numero maggiore di capillari e quindi rende l'atleta più resistente alla fatica.

L'aumento di capillari favorisce un maggior volume di scambio dell'ossigeno e dei metaboliti, quindi la rifosfatizzazione (ADP->ATP e creatina->fosfocreatina) sarà favorita e avverrà più rapidamente.

La capillarizzazione permette quindi la riduzione del lattato e un tasso di fosfocreatina maggiore.

La capillarizzazione è indicata anche per protocolli di medicina estetica, per le metodologie correttive nella PEFS e nell'AL, al fine di aumentare il microcircolo, mobilitare i lipidi e migliorare la circolazione sanguigna.

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.

! Attenzione




L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

CAPILLARIZZAZIONE

DURATA 20 minuti

POTENZA MASSIMA 15%

PROGRAMMA 39

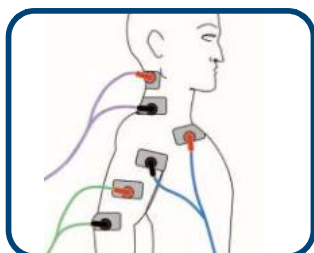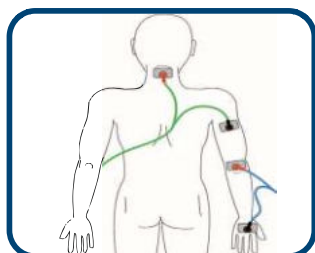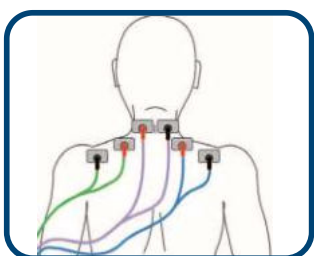

TRATTAMENTO: CAPILLARIZZAZIONE ARTI INFERIORI

i Informazioni

Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.

! Attenzione




L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

CAPILLARIZZAZIONE

DURATA 20 minuti

POTENZA MASSIMA 15%

PROGRAMMA 40

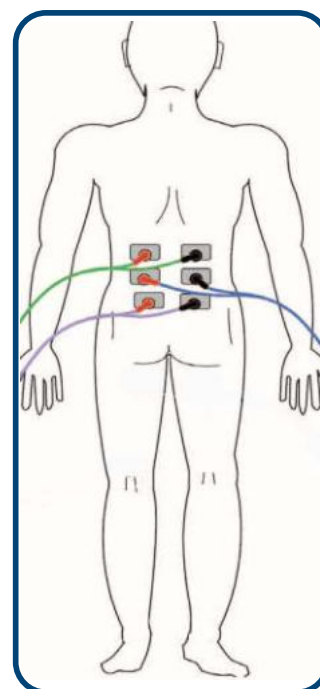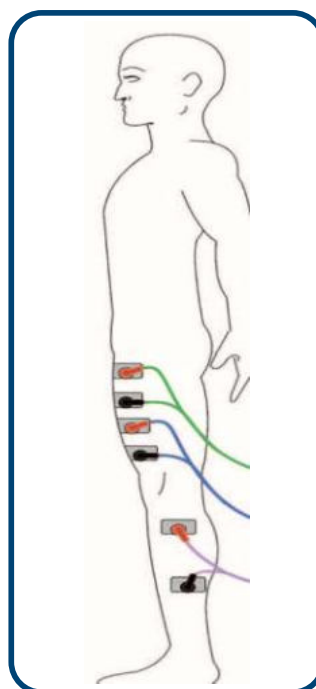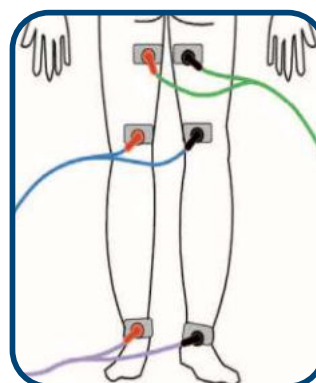

TRATTAMENTO: DECONTRATTURANTE ARTI SUPERIORI

A causa di errati gesti atletici o di eccessi di sforzo, gli atleti vanno incontro a fenomeni di contratture. A questo proposito la fisioterapia e la medicina dello sport hanno sviluppato protocolli terapeutici per il recupero chiamati protocolli decontratturanti. Dalle esperienze e dal follow-up medico, tuttora in corso, si evince che il supporto con lo stimolatore alla metodiche tradizionali del terapeuta (massaggio decontratturante) porta un risultato positivo e una accelerazione nel recupero dell'atleta infortunato. La frequenza debole a 1 Hz permette di ridurre la contrattura e permette di diminuire le tensioni muscolari.

Il programma decontratturante con lo stimolatore muscolare è indicato per le contratture dei grandi gruppi muscolari, del torcicollo e delle lombalgie. Si suggerisce inoltre, quando necessita, di abbinare il ciclo decontratturante ai programmi di stimolazione antalgica.

Durante il ciclo è sconsigliata la stimolazione degli stessi gruppi muscolari con altri programmi.

i Informazioni




Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.

! Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

DECONTRATTURANTE

DURATA	20 minuti
POTENZA MASSIMA	15%
PROGRAMMA	41

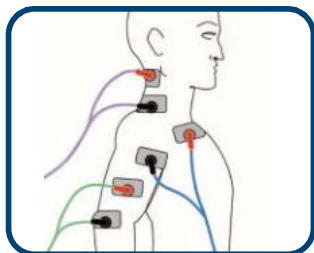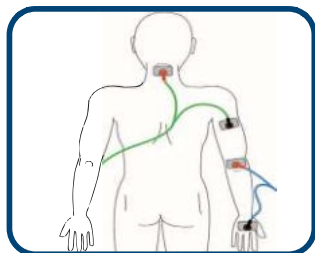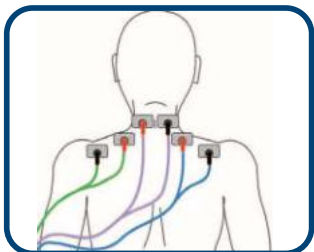

TRATTAMENTO: DECONTRATTURANTE ARTI INFERIORI

i Informazioni




Si consiglia di usare le potenze minime consigliate.

! Attenzione

L'intensità deve essere inferiore alla soglia del dolore.

DECONTRATTURANTE

DURATA	20 minuti
POTENZA MASSIMA	15%
PROGRAMMA	42

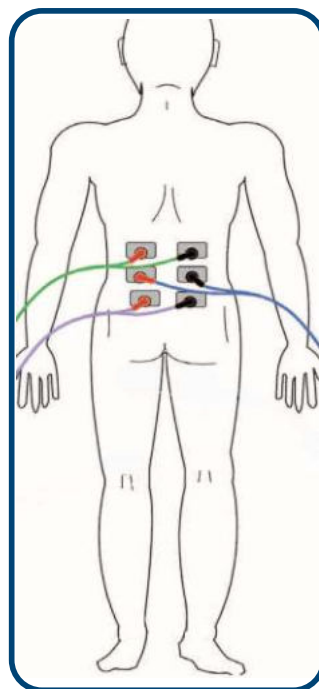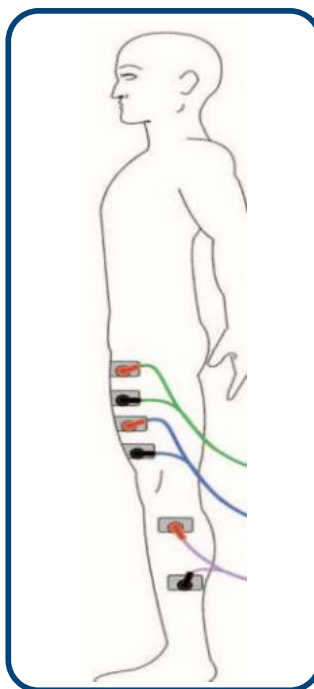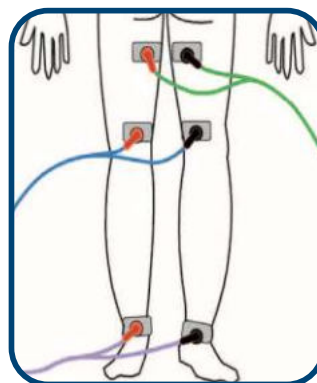

PROGRAMMI ESTETICI

	PROG.	PAG.		PROG.	PAG.
<u>ULTRASUONI PROGRAMMI BENESSERE:</u>					
Acne e brufoli	01	06	Cistite	73	15
Cellulite addome	07	06	Flebite	74	15
Cellulite arti inferiori	08	06	Fistole	75	15
Cellulite arti superiori	09	06	Vene varicose	76	15
Cellulite glutei	10	06	Azione anti-age	81	15
<u>ULTRASUONI PROGRAMMI ESTETICI:</u>			Antirughe	84	15
Addome	51/52/53	08	Sarcopenia	86	-
Anti-age	54	08	Post influenza	87	-
Buccia d'arancia	55/56/57	08	Sindr. Menier	88	-
Culottes cheval	58/59/60	08	Sindr. Tourette	89	-
Cuoio capelluto	61/62/63	08	Sindr. Guillain-B.	90	-
Esterno braccia	64/65/66	08	Osteocondrosi	91	-
Esterno cosce	67/68/69	08	Herpes	92	-
Fianchi e schiena	70/71/72	08	Narcolessia	93	-
Ginocchia	73/74/75	08	Cefalea Tensiva	94	-
Glutei	76/77/78	08	Tachicardia	95	-
Interno braccia	79/80/81	09	Sinusite	96	-
Interno cosce	82/83/84	09	Alterazione Alvo	97	-
Interno ginocchia	85/86/87	09	Bronchiectasie	98	-
Macchie della pelle	88	09	Emicrania e aura	99	-
Pelle ruvida	89/90/91	09	Depres. Maggiore	100	-
Polpacci	92/93/94	09	Depres. Distimica	101	-
Uomo	95/96/97	09	Disturbo Bipolare	102	-
Rigenerazione tessuti cutanei	98	09	Disturbo ADHD	103	-
Trattamento acne	99	09	Morbo di Parkinson	104	-
Trattamento anti rughe	100	09	Morbo di Alzheimer	105	-
Trattamento couperose	101	10	SLA	106	-
Trattamento smagliature	102	10	Disturbo della memoria	107	-
Trattamento vene varicose	103	10	Vagotonia	108	-
Viso	104/105/106	10	Alessitimia	109	-
Veicolante	107/108/109	10	Morbo di Crohn	110	-
V-Sono Plus	110	10	Acufeni	111	-
<u>MAGNETO PLUS PROGR. ESTETICI/BENESSERE:</u>			Schizofrenia	112	-
Recupero sport	21	12	Algodistrofia	113	-
Energia	22	12	Psoriasi	114	-
Disintossicante	23	12	Iperteroidismo	115	-
Sonno	26	12	Ipotiroidismo	116	-
Deficit posturale	28	12	Progr. liberi	da 117 a 121	-
Iperattività	30	12	<u>MAGNETO LIGHT PROGR. ESTETICI/BENESSERE:</u>		
Deficit attenzione	32	12	Acne	27	18
Mal di denti	34	12	Smagliature	28	18
Rinnovamento tissutale	36	12	Lacerazione pelle	29	18
Dolori mestruali	44	12	Endometriosi	31	18
Estrazione dente prima	46	13	Programma libero 1	38	18
Estrazione dente dopo	47	13	Programma libero 2	39	18
Impianto prima	48	13	Programma libero 3	40	18
Impianto dopo	49	13	Programma libero 4	41	18
Enuresi notturna	51	13	<u>MAF THERAPY:</u>		
Parodontosi	52	13	Programma notturno	35	20
Infiammazione fascio vasc. nervoso	54	13	<u>LASER:</u>		
Infiammazione prostata	56	13	Programma	36	22
Emicrania	57	13	Programma libero	37	22
Vertigini	58	13	<u>PROGRAMMI SPORTIVI E.M.S.:</u>		
Recupero atleti	59	14	Forza arti superiori		25
Stipsi	60	14	Forza arti inferiori		25
Astenia depressiva	61	14	Forza esplosiva arti superiori		26
Cellulite compatta	62	14	Forza esplosiva arti inferiori		26
Cellulite molle	63	14	Forza resistente arti superiori		27
Cellulite edematosa	64	14	Forza resistente arti inferiori		27
Cellulite adiposa	65	14	Resistenza aerobica arti superiori		28
Acne	66	14	Resistenza aerobica arti inferiori		28
Deficit immunitario	67	14	Recupero attivo arti superiori		29
Smagliature	68	14	Recupero attivo arti inferiori		29
Lacerazione pelle	69	15	Capillarizzazione arti superiori		30
Metabolismo lento	70	15	Capillarizzazione arti inferiori		30
Piaghe	71	15	Decontratturante arti superiori		31
Endometriosi	72	15	Decontratturante arti inferiori		31